



BANHO NO LEITO

Tratamento de pacientes
acamados e com
mobilidade reduzida.



BANHO NO LEITO

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Pensando em deixar os banhos no leito mais confortáveis para os pacientes e econômicos para os hospitais e unidades de saúde, a **SASBIO** desenvolveu uma solução integrada e customizada que utiliza insumos com padrão de alta tecnologia, protegendo contra contaminações e doenças que são comuns em ambientes com intervenções médico-hospitalares. As soluções **SASBIO Banho no Leito** utilizam todos os critérios de sustentabilidade e o conceito de ESG, traduzindo-se em qualidade de saúde e de vida.

BANHO NO LEITO CONVENCIONAL



Atualmente este procedimento comum é rotineiramente executado pelas equipes de enfermagem que se utilizam de acessórios como: bacias, baldes, cubas, sabonetes e shampoos nos procedimentos de higienização corporal em pacientes que passam por procedimentos ou que apresentam doenças que reduzem a sua capacidade de mobilidade física surgindo à necessidade do banho ser realizado no leito.

Na sua maioria, são 2 (dois) profissionais envolvidos na execução *desse *procedimento, onde atualmente o tempo gasto com o preparo e o modo de execução elevam seus custos.

A realização deste cuidado exige muito esforço físico dos profissionais, causando em muitos casos lesões lombares, doenças osteoarticulares e o afastamento por doenças ocupacionais.



KIT BANHO NO LEITO SASBIO

Um recipiente PEAD (Poletileno de Alta Intensidade) reciclável de 1 litro para água.

Um recipiente PEAD (Poletileno de Alta Intensidade) Reciclável de 200ml para acondicionamento de sabão líquido ou produtos similares.



OBJETIVOS



BEM ESTAR

Reproduzir no banho no leito as sensações semelhantes às promovidas pelo banho no chuveiro.



CONFORTO

Proporcionar aos pacientes um maior conforto antes, durante e após o processo do banho.



DIMINUIÇÃO DE DOENÇAS

Reduzir o esforço repetitivo ocorrido nos banhos de leitos, diminuindo a chance de desenvolver doenças ocupacionais como lombalgia e doenças osteoarticulares.



REDUÇÃO DE MICROORGANISMOS

Reduzir o trânsito de microorganismos patogênicos de uma região corporal do paciente para outra.

PASSO A PASSO



1 Higienize as mãos segundo as orientações da ANVISA



2 Coloque a luva de procedimentos



3 Abra a embalagem do KIT SASBIO



4 Anote as informações do paciente no rótulo



5 Higienize a parte externa do recipiente e as tampas



6 Abra as tampas fixadas por pressão



7 Acrescente água e sabonete



8 Realize o banho do paciente acamado



9 Após procedimento, higienize os recipientes e guarde o KIT SASBIO junto ao leito do paciente

DURABILIDADE: 15 DIAS

- Indicado para banho no leito;
- Pode ser utilizado em hospitais e pessoas acamadas com dificuldades de locomoção;
- O produto pode ser utilizado quantas vezes forem necessárias dentro do período de 15 dias.



VAN TA GENS



- Reproduz ao paciente a sensação de banho no chuveiro;
- Menor consumo d` água, menos peso na roupa de cama;
- Menor peso, menor custo com lavanderia;
- Maior mobilidade para o profissional de enfermagem;
- Mais conforto e segurança no manuseio;
- Uso individual minimiza a possibilidade de infecção cruzada;
- Uso exclusivamente individual;
- Menor risco de infecção cruzada;
- Menor consumo de água;
- Redução do custo total do processo de banho no leito;
- Menor risco de hipotermia;
- Sustentável;
- 100% reciclável;
- Menor tempo no processo de banho.

ESTATÍSTICAS




Redução de custos:

↓ 70%

1,2L Consumo: Consumo de água no banho no leito em litros.

8 MIN Minutos em banho: Tempo necessário para dar banho no paciente.

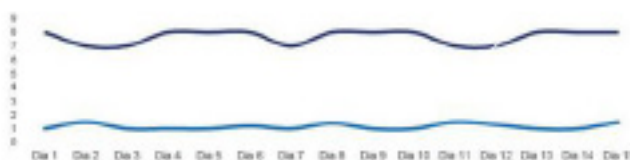

COMPARATIVO DE CUSTO

Materiais Utilizados	SASBIO	Balde e Bacia	Lenço Umedecido	Esponja para banho
CUSTOS DIRETO				
Kit SASBIO Inno Care Hospitalar Kit para 15 dias	2,39			
Balde e Bacia banho ainda mais utilizado		0,82		
Lenço Umedecido Romed packs com 4und			7,39	
Esponja Kolplast Pacotes com 24und				18,63
Compressa Wypall Pacotes com 300 Und	0,27	0,27		
Sabonete Liquido Rioquimica 100ml		5,94		
Detergente nzimático Rioquimica riozime ECO da 1000ml		60 ml 2,03		
Álcool Etílico hidratado 70° INPM Hospitalar de 1000ml	20 ml 0,15	100 ml 0,77		
Saco plástico 300 x 500 mm - 2und		0,68		
CUSTOS INDIRETOS E SERVIÇOS				
Lavanderia referente à roupa de cama encharcada (molhada) durante o banho	1,2 kg 2,99	12 kg 29,88		
Enfermagem dois profissionais envolvidos no procedimento	8 min 2,96	26 min 9,62	12 min 4,44	12 min 4,44
TOTAIS	R\$8,77	R\$50,02	R\$11,83	R\$23,07



sasbio



SCN Quadra 01, Bl. F, Sala 315 e 316, Ed. America Office
Tower Brasília/DF - CEP: 70.711-905
Telefone: (61) 3257.3601

Rua do Acre, 83, Centro, 11º andar - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.081-000 - Telefone: (21) 3825.4444

 0800 000 2359
 sasbio.com.br
 contato@sasbio.com.br